


Piton GC

Технические
характеристики

Наружный диаметр	8F (0,104"/ 2.64 мм)
Внутренний диаметр	5F (0,073"/ 1.86 мм)
Общая длина катетера	91 см
Рабочая длина катетера	85 см
Наружный диаметр проводника	макс. 2 x 0,035"

Информация
для заказа

Кат. №	Рабочая длина (см)	Кривизна дуги наконечника
PTN8SC063085	85 см	Малая

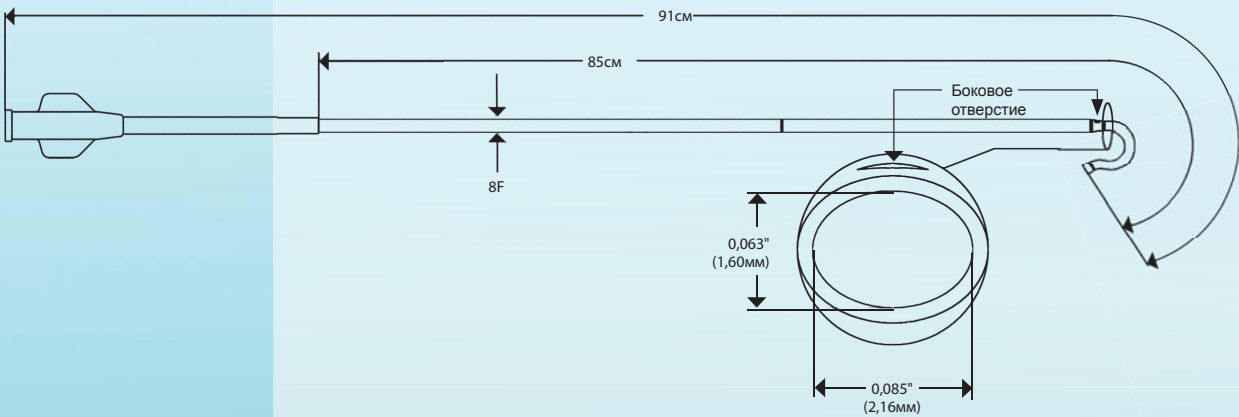

www.medtronic.com
www.invatec.com

Via Martiri della Libertà 7
25030 Roncadelle (BS) – Italy
(Италия)
Телефон: + 39 030 2589311

Центральный офис
Hungerbuelstrasse 12
8500 Frauenfeld – Switzerland
(Швейцария)



Piton GC

ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Новый подход
к вмешательствам на сонных артериях

Специфические решения с учетом
анатомических особенностей



WELCOME TO
PERIPHERAL
POWER.

TO INNOVATE

TO COLLABORATE

TO TREAT

Innovating for life.

©2011 Medtronic, Inc. Все права защищены. Отпечатано в ЕС. Не для распространения на территории США. 0170598, 04/11

Piton GC

ПРОВОДНИКОВЫЙ КАТЕТЕР ДЛЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Анатомо-специфические решения

Лучшее решение для вмешательств на сонных артериях

Доступ к супрааортальным сосудам посредством двух проводников

- Жесткий 0,035" проводник в боковом отверстии обеспечивает надежную поддержку при прохождении наружной сонной артерии стандартным проводником 0,035"

Конструкция шахты катетера с оплеткой


- Улучшенная управляемость и контроль

Гибкий гофрированный кончик

- Для атравматичной фиксации в устье



Уверенный доступ к сонной артерии

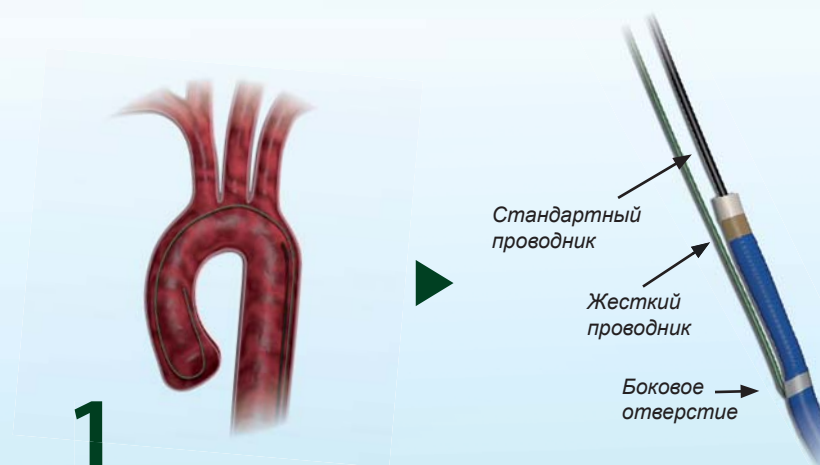

Введение проводника в дугу аорты
Введите проводник 0,035", используемый для доступа к сонной артерии, в нисходящий отдел аорты. Жесткий сменный проводник 0,035" следует завести за дугу аорты.

Введение проводников в Piton GC
Вставьте жесткий проводник в "боковое отверстие", а стандартный проводник в центральное отверстие катетера Piton GC.



Позиционирование Piton GC в области супрааортальных сосудов

Введите и продвигайте систему до тех пор, пока боковое отверстие Piton GC не окажется напротив устья целевого сосуда.



Прохождение устья ОСА

Поверните Piton GC так, чтобы направить кончик катетера в устье сосуда. Осторожно продвигайте стандартный проводник в сонную артерию.



Канюлирование ОСА

Втяните жесткий проводник в боковое отверстие и продвиньте его на тот же уровень, что и стандартный проводник. Извлеките стандартный проводник и приступайте к запланированному вмешательству.

Для получения более подробной информации обратитесь к Руководству по использованию.